


Škálovateľné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v priebehu niekoľkých minút

Zastavte šírenie pomocou dostupného
testovania pre všetkých


siemens-healthineers.com/clinitest-covid-antigen

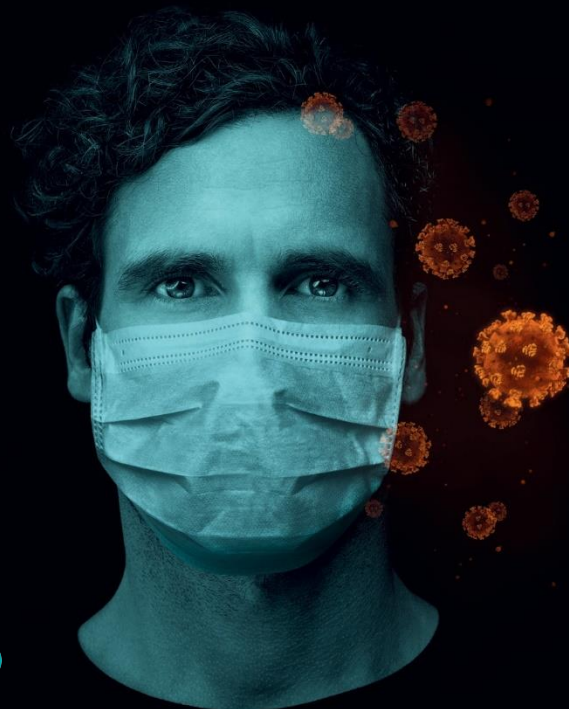

CLINITEST Rapid COVID- 19 Antigen Test

Teraz s
jednoduchším
odberom
vzoriek pre
lepšiu
dostupnosť

Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test* s laterálnym prietokom, ktorý distribuuje spoločnosť Siemens Healthineers, sa vizuálne odčítava a jednoducho používa, pričom výsledky sú k dispozícii už v priebehu 15 minút. Nie je potrebný žiadny špecializovaný personál ani vybavenie – test môžu vyškolení odborní pracovníci vykonať kedykoľvek a kdekoľvek. Rýchly antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test môže ako súčasť komplexnej stratégie pomôcť komunitám zastaviť šírenie.

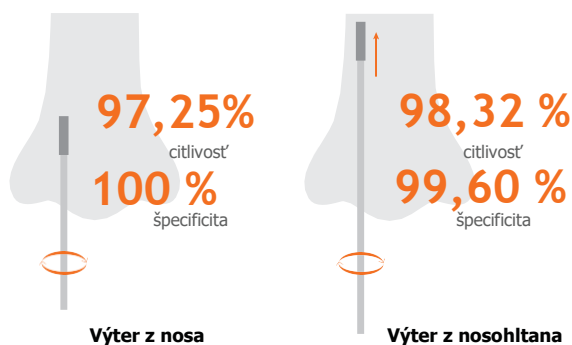

Rýchle testovanie, spoľahlivé výsledky

Presné výsledky už do 15 minút



Škálovateľné testovanie na manažovanie zdravia populácie

Možnosť použitia pri testovaní na pracovisku, kde je to najviac potrebné



Eliminuje tradičné prekážky z hľadiska prístupu

Nevyžaduje sa laboratórny personál ani vybavenie; dve možnosti na odber vzorky

Doplňujúce informácie o produkte

Klinický výkon testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test sa hodnotil na siedmich pracoviskách v USA, kde sa zaraďovali a testovali pacienti. Testovanie sa vykonalo na viacerých rozličných pracoviskách, vo viacerých klinických prostrediach a s rôznymi pracovníkmi. Výsledné súbory údajov pre vzorky z nosohltana aj prednej časti nosa vyhovujú najnovším požiadavkám väčšiny regulačných orgánov a preukazujú vynikajúci výkon.

Výkon testu pri výtere z nosohltana

Metóda	PCR (výter z nosohltana)		Celkové výsledky	
	Výsledky	Pozitívne		Negatívne
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (výter z nosohltana)	Pozitívne	117	3	120
	Negatívne	2	743	745
Spolu		119	746	865

Relatívna citlivosť: 98,32 % (95 % IS: * 94,06 % až 99,80 %)

Relatívna špecificita: 99,60 % (95 % IS: * 98,83 % až 99,92 %)

Presnosť: 99,42 % (95 % IS: * 98,66 % až 99,81 %)

*Interval spoľahlivosti

Výkon testu pri výtere z nosa

Metóda	PCR (výter z nosohltana)		Celkové výsledky	
	Výsledky	Pozitívne		Negatívne
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (výter z nosa)	Pozitívne	106	0	106
	Negatívne	3	128	131
Spolu		109	128	237

Relatívna citlivosť: 97,25 % (95 % IS: * 92,17 % až 99,43 %)

Relatívna špecificita: 100 % (95 % IS: * 97,16 % až 100 %)

Presnosť: 98,73 % (95 % IS: * 96,35 % až 99,74 %)

*Interval spoľahlivosti

Špecifikácie

Čas do získania výsledku: 15 minút

Typ vzorky: výter z nosohltana alebo výter z prednej časti nosa

Skladovanie: Pri izbovej teplote alebo v chlade (2 – 30 °C)

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby

Detegovaný antigén: nukleokapsid

CLINITEST je obchodná známka spoločnosti Siemens Healthcare Diagnostics Inc. alebo jej pridružených spoločností. Všetky ostatné obchodné známky a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Produkt podlieha kontrole úradu FDA pre povolenie na núdzové použitie (EUA) a nie je k dispozícii na predaj v USA. Dostupnosť produktu sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.

Distribuuje spoločnosť Siemens Healthineers. Informácie o dostupnosti vám poskytne miestny zástupca. Doplňujúce špecifikácie a údaje o výkone nájdete v návode na použitie.

Hlavné sídlo spoločnosti Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Nemecko
Telefón: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Publikovala

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Telefón: +1 781-269-3000